

1、是否准备好进入运动想象实验范式的信号采集？

☒是 ☐否

2、实验周边环境是否安静封闭？

☒是 ☐否

3、请确认是否连接好以下脑电设备。




☒是 ☐否

4、请受试者戴好电极帽坐在在电脑屏幕前的椅子上。




☒是 ☐否

5、请打开 DeviceController 软件，是否搜索到 triggerbox 和信号接收器两个设备？

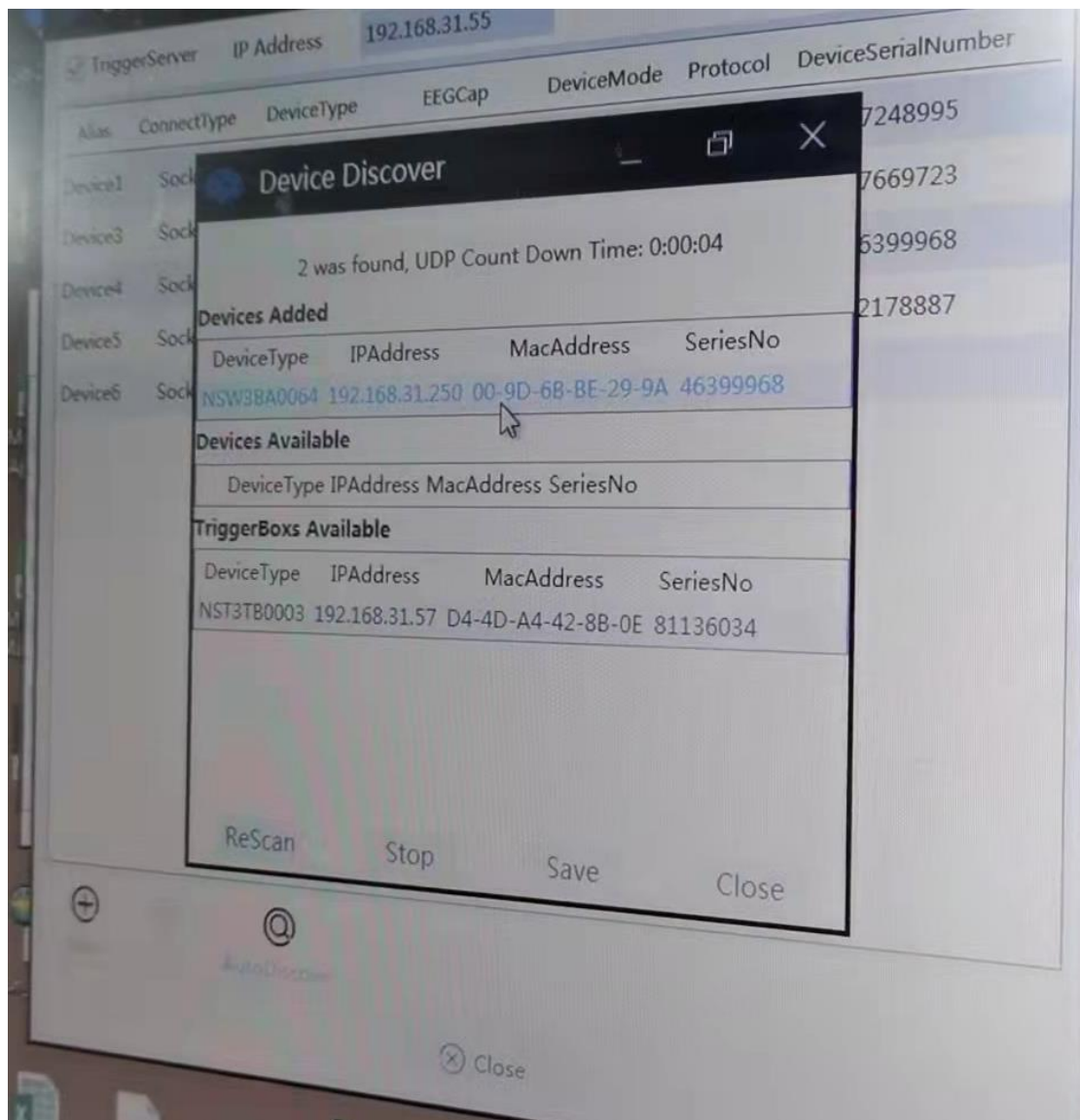

☒是 ☐否

6、请录入受试者基本信息。

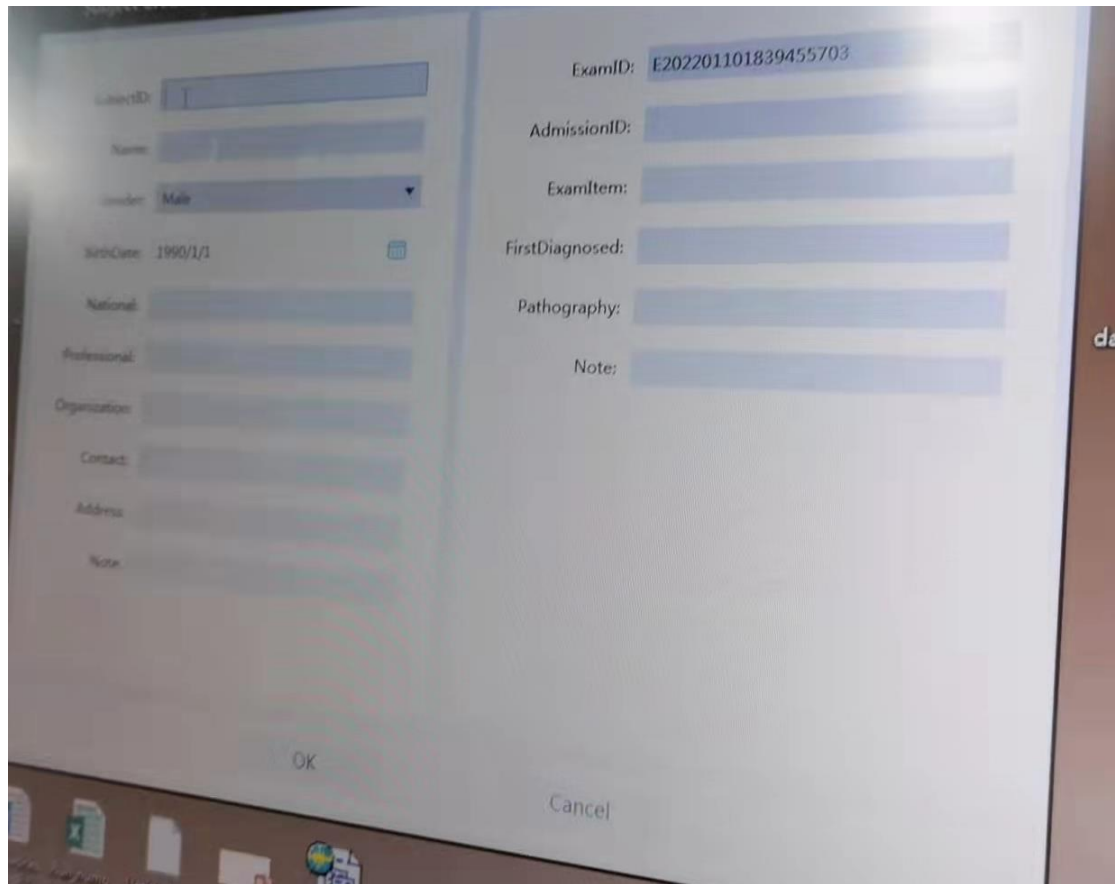

☒是 ☐否

7、确定电极帽与脑电其他设备是否成功连接上？（triggerbox 灯亮，信号接收器第一个灯常亮，第二个灯闪烁）








☒是 ☐否

7、给受试者打导电膏，确定所需电极的阻抗是否在设置阈值以下？

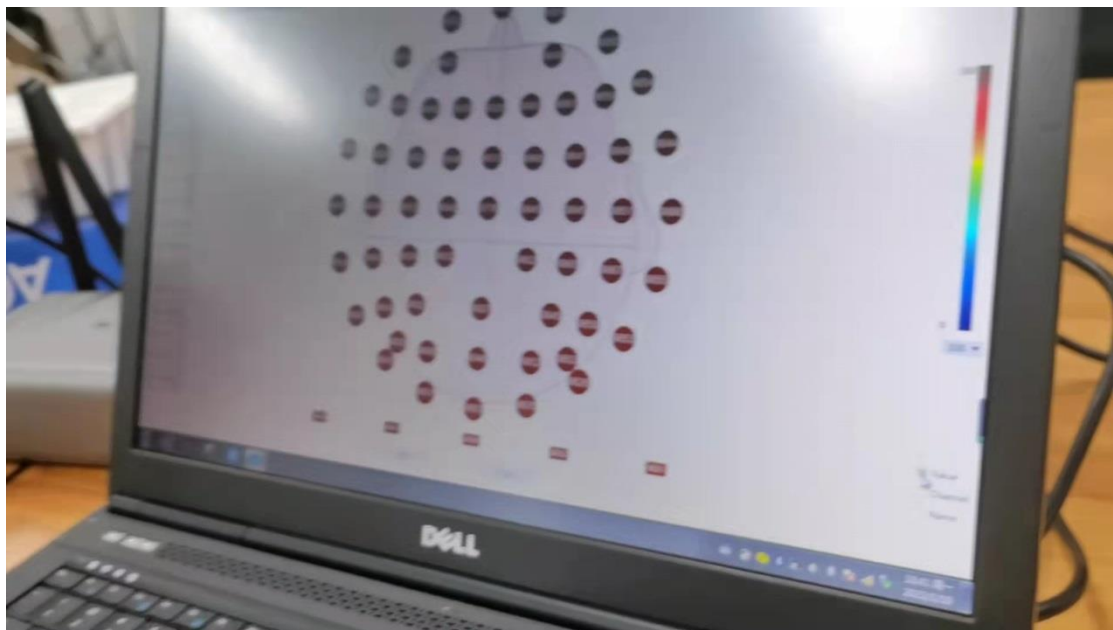



☒是 ☐否

8、准备工作已完成，是否开始正式采集实验？

☒是 ☐否

9、打开 E-prime 软件，开始运行运动想象实验范式。



e2f5904c56015322cd5f07c2f53d1572.mp4